

组件及名称


- 1.使用前请核对以下配件,如有缺件,请联系供应商。
2.配件如有损坏,请向我司各经销点购买相匹配的配件使用。

编号	部件名称	材质	树脂名称	使用温度	数量	备注
①	上盖	PP	聚丙烯	-20℃~120℃	1	食品接触用
②	吸力硅胶	硅橡胶	/	-20℃~200℃	1	食品接触用
③	三通	PP	聚丙烯	-20℃~120℃	1	食品接触用
④	喇叭口硅胶	硅橡胶	/	-20℃~200℃	1	食品接触用
⑤	防尘盖	PP	聚丙烯	-20℃~120℃	1	食品接触用
⑥	鸭嘴阀	硅橡胶	/	-20℃~200℃	1	食品接触用
⑦	奶瓶	PP	聚丙烯	-20℃~120℃	1	食品接触用
⑧	主机	/	/	/	1	/
⑨	奶瓶盖	PP	聚丙烯	-20℃~120℃	1	食品接触用
⑩	奶嘴	硅橡胶	/	-20℃~200℃	1	食品接触用
⑪	螺纹盖	PP	聚丙烯	-20℃~120℃	1	食品接触用
⑫	主机接头	PP	聚丙烯	-20℃~120℃	2	/
⑬	PVC吸管	PVC	聚氯乙烯	-20℃~120℃	1	/
⑭	USB线	/	/	/	1	/
⑮	说明书	/	/	/	1	/

以上食品接触用奶嘴符合GB 4806.2-2015
食品接触用塑料制品符合GB 4806.7-2016
食品接触用橡胶制品符合GB 4806.11-2016

友情提示:食品接触用部件,请每次使用前清洗并消毒。

按键、显示及使用说明

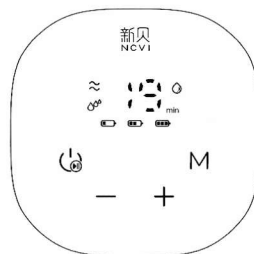

使用前请确认吸乳器的组件已消毒并按照指示正确组装。使用前请清洁双手,用湿热的毛巾热敷并按摩乳房,按摩完以后身体坐正并微微向前倾(不能躺卧、不能倾斜吸乳器),使吸乳器三通内的喇叭硅胶中央对准乳头,并紧紧贴于乳房上,确保没有空气进入,以确保正常吸力。


按键说明

符号	符号名称	使用说明
⏻	开关/暂停键	长按开机,再长按关机;短按暂停,再短按继续,暂停10分钟无操作自动关机。
M	模式切换键	开机默认变频吸乳模式,按此键为泌乳、吸乳、变频吸乳模式,以此循环。
-	档位调节键	变频吸乳模式1~9档、泌乳模式1~9档、吸乳模式1~9档可调节;此吸乳器可任意调节吸力大小到您觉得舒适的吸力(在最适合自己吸力的情况下吸乳最舒服)。
+		

显示屏显示说明

符号	符号名称	使用说明
🔋	电池符号	显示“🔋”此符号并闪烁,表示急需充电;电量过低时自动关机;充电过程中呈现流水灯状态,三个指示灯长亮,表示电已充满。
⌚	时间显示	工作30分钟自动关机。
1-9	档位显示	L1~L9档,只有在调节档位的时候可见。
🔄	变频吸乳	五轻一重吸乳节奏。
≈	泌乳模式	开机后,首次切换至泌乳模式,每45秒自动加1档,自动升档至5档,除暂停外,如有其它操作,自动升档失效;6~9档需手动调节。
🍼	吸乳模式	正常吸乳节奏。

友情提示: 1.奶瓶里的奶水不能超过奶瓶的最大容量,如果盛的太满,奶水从三通两侧透气孔内流出,请立即关闭吸乳器停止吸乳,更换奶瓶再继续吸乳。
2.吸乳完成后,取下奶瓶,盖好奶嘴防尘盖,将盛有乳汁的奶瓶放置好;然后请将主机擦拭干净后连同不需要清洗的部件收放好,并及时清洗、烘干吸乳器的其它组件,以防乳液干涸在组件上不易清洗。如果不需要立即哺喂宝宝,请将母乳放置冰箱内存储。

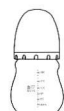

产品特点

1. 本产品采用泌乳、吸乳、变频吸乳三种模式，可任意调节吸力大小到您觉得舒适的吸力。
2. LED显示屏，工作内容清晰可见。
3. 内置锂电池，不使用时请将电池充满电，外出随时可用，方便妈妈携带。
4. 本吸乳器采用USB供电模式，可适配器、电脑、充电宝供电。
5. 防逆流设计，使用时不必担心乳液会倒流而损坏主机。
6. 采用高频率刺激泌乳节奏，有规律的刺激快速泌乳。
7. 配有PP材质奶瓶，防腐蚀、不易摔碎，经久耐用。

供电使用及充电方法

供电使用方法

适配器供电：使用时将连接好的适配器插入电源插座上，确定安插到位，长按开关/暂停键3秒开机，根据自己的舒适度选择模式和吸力大小。

锂电池供电：本产品内置锂电池，使用时直接长按开关/暂停键3秒开机(电池有电状态下)，根据自己的舒适度选择模式和吸力大小，当电池符号闪烁时，表示电量不足，请及时充电。

充电方法

充电时请将连接好的适配器插入电源插座上，确定安插到位，充电时应在关机状态下，开机状态下不充电，充电过程中电源符号呈流水灯状，电池符号长亮时表示电已充满，请拔掉电源。

重要提示


内置锂电池禁止取出，如果没电关机，只需将所适用的适配器按要求插进USB孔内，接通电源，随即电源符号呈流水灯状，表示正在充电，充满电后拔掉电源即可。

产品规格


品 名	智能电动吸乳器	包 装	1台入
适用型号	XB-8768	制 造	江苏无锡
额定电压	5V二	保修期	2年
额定电流	650mA	制造年份	标示于包装上
额定功率	3.25W	建议使用环境	请于室内使用
执行标准	Q/320292 AAYZ01		

如何安装电动吸乳器


开始组装吸乳器前，请先洗净双手，使用前请务必对能消毒各部件进行清洗并消毒。

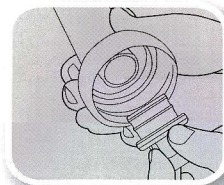


1. 将鸭嘴阀套在吸乳器三通内部柱子表面，请确保推到底。

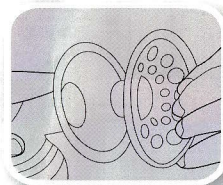


2. 将喇叭口硅胶安装于三通喇叭口处，确保贴合到位。

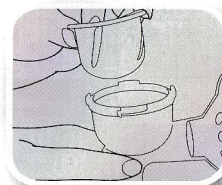


3. 将吸力硅胶装入吸乳器三通内。

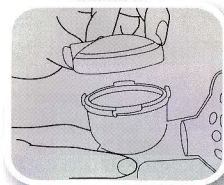


4. 将上盖与三通进行组装，确保吸力硅胶压平无皱起。

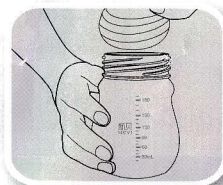

5. 将奶瓶安装于三通(主架)上，将其旋紧。

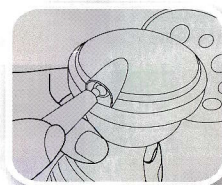

6. 将PVC管上的主机接头插入上盖的导孔内，确保插到位。

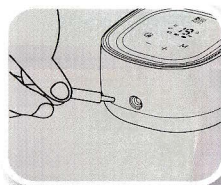


7. 将PVC管上的主机接头插入主机的插孔内，确保完全插入。




8. 将迷你USB接口插入主机插孔内，再将USB插头插入充电宝、电脑USB孔内，也可以通过适配器(5V/1A的适配器)连接电源插座上，确定安插稳固。

如何安装电动吸乳器


开始组装吸乳器前，请先洗净双手，使用前请务必对能消毒各部件进行清洗并消毒。

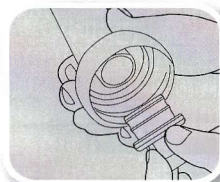


1. 将鸭嘴阀套在吸乳器三通内部柱子里面，请确保推到底。

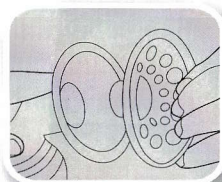


2. 将喇叭口硅胶安装于三通喇叭口处，确保贴合到位。

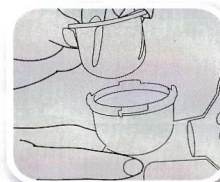


3. 将吸力硅胶装入吸乳器三通内。

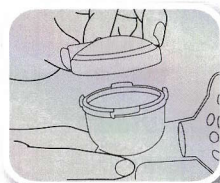


4. 将上盖与三通进行组装，确保吸力硅胶压平无皱起。

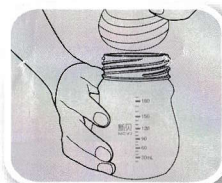


5. 将奶瓶安装于三通(主架)上，将其旋紧。

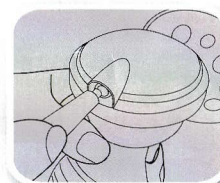

6. 将PVC管上的主机接头插入上盖的导孔内，确保插到位。

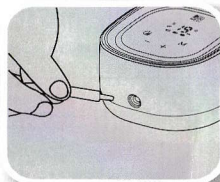

7. 将PVC管上的主机接头插入主机的插孔内，确保完全插入。

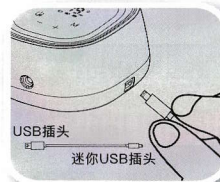

8. 将迷你USB接口插入主机插孔内，再将USB插头插入充电宝、电脑USB孔内，也可以通过适配器(5V/1A的适配器)连接电源插座上，确定安插稳固。

注意事项




1. 使用本产品之前，请详细阅读说明书。
2. 本产品第一次使用前请务必充满电；不要将电池组长期充电；在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；锂电池只能由授权服务商进行更换，用错误型号的电池更换会有爆炸危险；按国家的环保法规处理废弃电池或电池组。(备注：锂电池长时间搁置不用会导致电池深度放电引起死机，需插上电源进行激活，插上电源后等待十分钟左右屏幕亮起表示已激活，即可继续充电，如超过半小时未激活请咨询客服处理。)
3. 不要将吸乳器主机放入水中或者其他液体中清洗。
4. 不要将吸乳器主机放入蒸汽消毒器内消毒。
5. PVC管和上盖建议不要消毒，如果脏了，清洗一下即可，用吹风机将PVC管的内外壁吹干。确定PVC管的内壁无任何水珠后，才能继续使用吸乳器，如果PVC管内壁残留着水珠，水珠会被吸到主机内，会造成主机损坏。
6. 吸力硅胶消毒后，请您将吸力硅胶水分烘干再使用。
7. 电量不足时，按开机键单格电池符号闪烁，请及时充电。
8. 请使用本产品附送的USB充电线，不要将其它任何厂家的USB线插在主机上使用，以免造成主机损坏。
9. 本产品附送的USB充电线，仅限使用于本公司电动吸乳器产品，如使用于其它电器产品而导致电器损坏，公司不承担责任及赔偿。
10. 如使用直流适配器，请选择输入电压AC100-240V，输出DC5V，1A的适配器。
11. 如若因操作不当，导致主机损坏，需要维修时我公司将收取相应的费用。

故障排除

吸力太小或者没有吸力

- a. 检查吸力硅胶和气缸上盖是否密封。
- b. 检查喇叭口硅胶是否安装到位。
- c. 检查阀门硅胶是否安装正确，有无翘起。
- d. 检查PVC管和主机的连接部位是否都已经安装好。
- e. 检查PVC管是否被扭曲或被压到。
- f. 检查PVC管两端与主机接头配合是否松动，如果易脱落，剪掉松弛的那一小段PVC管后，再插上主机接头即可使用。

★ 妈妈们吸乳时，姿势要端正，不能斜着身体或是侧卧吸乳，否则乳汁会倒流。

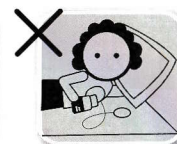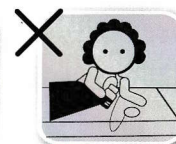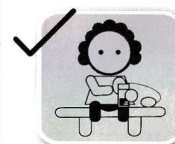

★ 此吸力硅胶清洗消毒后，必须烘干水分才能使用，PVC管不要清洗与消毒（此管为通气管，不与母乳接触）。



储存回收



环保
使用期限

该标志含义为环境保护使用期限。根据中国“电子电气产品有害物质限制使用管理办法”以及中国电子行业标准SJ/T 11364,“电子电气产品有害物质限制使用标识要求”,该标志要印制在中国境内售卖的电子电气产品上。

此标识期限(10年),为产品在正常使用的情况下其有害物质或危险物质不会泄露的期限,而不是保证产品使用性能期限。该电子电器产品含有某些有害物质在环保使用期限内可以放心使用。电子电器产品使用结束或废弃时,请遵从电子电器产品法律法规与回收、循环利用等相关的各地方法律规定。

有害物质或元素名称及含量的标示方式

有害危险物质和元素						
元素名称 部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料壳体	○	○	○	○	○	○
金属紧固件	○	○	○	○	○	○
气泵组件	×	○	○	○	○	○
电子板组件	×	○	○	○	○	○
显示屏组件	○	○	○	○	○	○
电池件	×	○	○	○	○	○
USB电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的代替。

母乳的储存/加热

储存母乳

吸取母乳完毕,盖紧存储盖/密封好存储袋,必须立即放入冰箱,用冷藏或冷冻皆可。

母乳类型	储存方式	储存温度	储存时间
刚挤出的母乳	室温	19℃~26℃	4小时~6小时(理想情况)
	冰箱冷藏室	<4℃	72小时~8天(理想情况)
	单门冰箱冷冻室	-15℃	2周
	双门冰箱独立冷冻室	-18℃	3~6个月
	专门的冷柜	-20℃	6~12个月

注:本表适用于足月健康婴儿,仅供参考,详情请向医院询问相关资讯。

加热母乳

解冻后您可选择暖奶器加热,请勿用微波炉/沸水加热,以免造成营养成分损失。加热后的母乳就可以哺喂您的宝宝。出于生物卫生考虑,牛奶/母乳和食物不应加热时间太长,在加热一次后不应再次加热。

注意事项

- 如果要冷冻母乳,请将乳液装至储奶瓶/储奶袋的3/4处即可,给结冰膨胀后留出空间,不要将母乳放置冰箱门侧保存。
- 为了保留母乳的营养成分,应提前将冷冻的乳汁放入冷藏室内解冻,或用温水(建议37℃左右)来解冻储奶瓶/储奶袋。
- 轻轻的摇动储奶瓶/储奶袋,使分离的脂肪能均匀的混合在乳汁中。
- 不要将冷冻的母乳放入微波炉或是沸水中加热,以免营养成分损失和烫伤宝宝。
- 解冻后的母乳不能再次冷冻,请不要把新鲜的母乳和解冻的母乳混在一起。

消毒方法

部件名称	清洗、消毒方法
主机、USB线	不能清洗消毒,表面脏了,用软布擦拭下即可。
上盖、PVC吸管、主机接头、吸力硅胶	建议不要清洗,如果脏了冲洗下即可,洗完一定要吹干水分才能使用。
三通、防尘盖、奶瓶、奶瓶盖、螺纹盖	此部件为塑料材质,可冲洗、洗碗机清洗(温度不能超过100℃);清洗完成可选择蒸汽消毒器、紫外线消毒器、微波炉(请将消毒部件装入消毒容器或消毒袋里)、水煮(水量不能低于被消毒的部件,部件不能直接接触到锅底及金属边缘,以免烫坏部件)消毒。
奶嘴、鸭嘴阀、喇叭口硅胶	此部件为硅胶材质,属易耗品,清洗时请轻轻冲洗,不宜揉搓和长时间高温消毒,以免造成过快老化或变形影响使用。

售后保修服务卡

感谢您选购本公司产品。为了您应有的权益敬请妥善保管保修卡，如有质量问题请与经销商接洽。

用户姓名:	产品名称:
用户电话:	产品型号:
购买商店:	购买日期:
购买地址:	

维修记录:

日期	维修内容	维修人	用户签名

1. 在用户按照本使用说明书的前提下，本产品自购买之日起两年内免费维修，请与购买处接洽。
2. 我方对下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。如：
 - A. 擅自拆装、改装该产品而造成的故障。
 - B. 在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落而造成的故障。
 - C. 因缺乏合理的保养而造成的故障。
 - D. 没有正确按使用说明书指示进行操作而造成的故障。
 - E. 因非我司授权的维修店不当修理而造成的故障。
3. 在要求提供免费保修服务时，您必须持有购买发票及保修卡。
4. 保修范围外的修理服务，将按规定收费。

产品合格证

品名: 智能电动吸乳器
型号: XB-8768
执行标准: Q/320292 AAYZ01
检验: 合格



感谢您使用新贝产品

我们致力于更优质的产品、更周到的服务、更优惠的价格

服务于消费者

公司有更多的产品供您选择

欢迎访问: www.xenbea.com

配 件: 上盖、三通、防尘盖、奶瓶盖、螺纹盖
保 质 期: 5年
生产许可证: (苏)XK16-204-01503
执行标准: GB 4806.7-2016
委 托 方: 浙江新贝医疗器械有限公司
委托方地址: 瑞安市塘下镇上金村
被委托方: 江苏新贝电器有限公司
被委托方地址: 无锡市新吴区新锦路115号



赠 品: 奶瓶
奶瓶保质期: 5年
生产许可证: 粤XK16-204-02573
执行标准: Q/DF 1-2019
委 托 方: 浙江新贝医疗器械有限公司
委托方地址: 瑞安市塘下镇上金村
被委托方: 东莞市鼎发塑胶制品模具有限公司
被委托方地址: 广东省东莞市长安镇厦岗社区第四工业区朗蟹西街2号C栋一楼2号



制造商: 江苏新贝电器有限公司
地 址: 无锡市新吴区新锦路115号 邮 编: 214112
电 话: 0510-81155000 传 真: 0510-81155918
E-mail: jswxzr@163.com 咨询热线: 400-886-6565
生产商: 浙江新贝医疗器械有限公司
地 址: 瑞安市塘下镇上金村

使用前, 请务必仔细阅读此说明书, 同时请将本说明书储存于随时可以拿取的地方保管。
版本: B-10